


Безопасность в НОВОМ СВЕТЕ

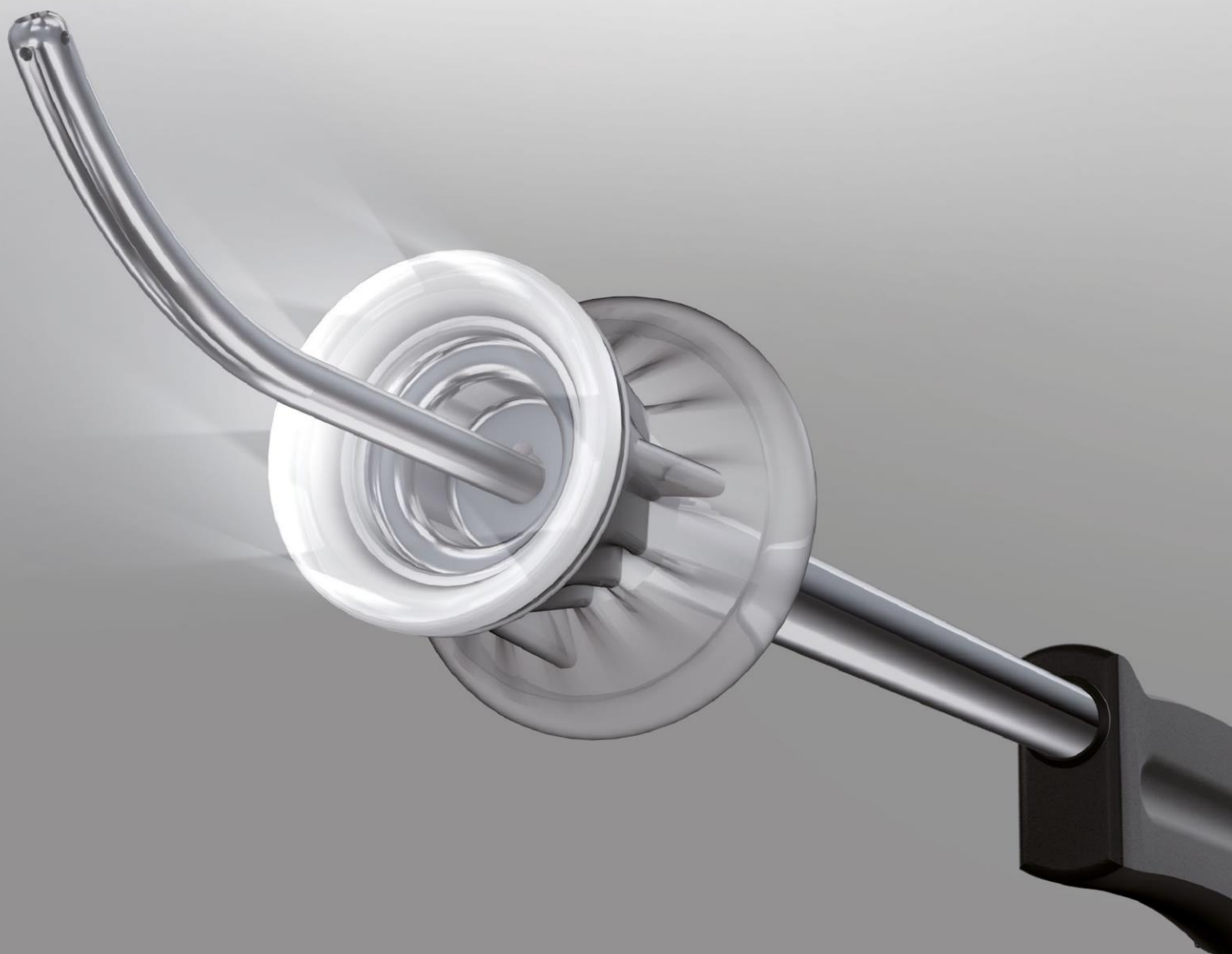

SecuFix Маточный манипулятор

Инновационная система с
кольпотрансиллюминацией и вакуумной
фиксацией

Разработка удобных для пациента, малоинвазивных методов гистерэктомии и связанные с ними хорошие результаты в настоящее время означают, что гистерэктомия сегодня может быть выполнена лапароскопически во многих случаях

Новый маточный манипулятор SecuFix устанавливает новые стандарты безопасности. Атравматичная фиксация матки с помощью вакуумной аспирации и "кольпотрансиллюминации", то есть возможность визуализации тканей с помощью дистального кольцевого освещения шейки матки, являются важными новыми функциями продукта для достижения оптимального хирургического результата и позволяют соответствовать онкологическим критериям, например, избежать внутрибрюшной дислокации опухолевых клеток.

Удобство в деталях

SecuFix состоит всего из 3 частей, что существенно упрощает эксплуатацию.


- Маточный манипулятор
- Маточный зонд со шкалой
- Кольпотрансиллюминатор


Кольпотрансиллюминатор – наилучшая операционная платформа

- Оптимальное разграничение шейки матки и влагалища
- Наилучшая визуализация свода


Стабильность = контроль

Стабильная конструкция делает маточный манипулятор SecuFix надежным инструментом, который позволяет хирургу перемещать матку в любом требуемом направлении.

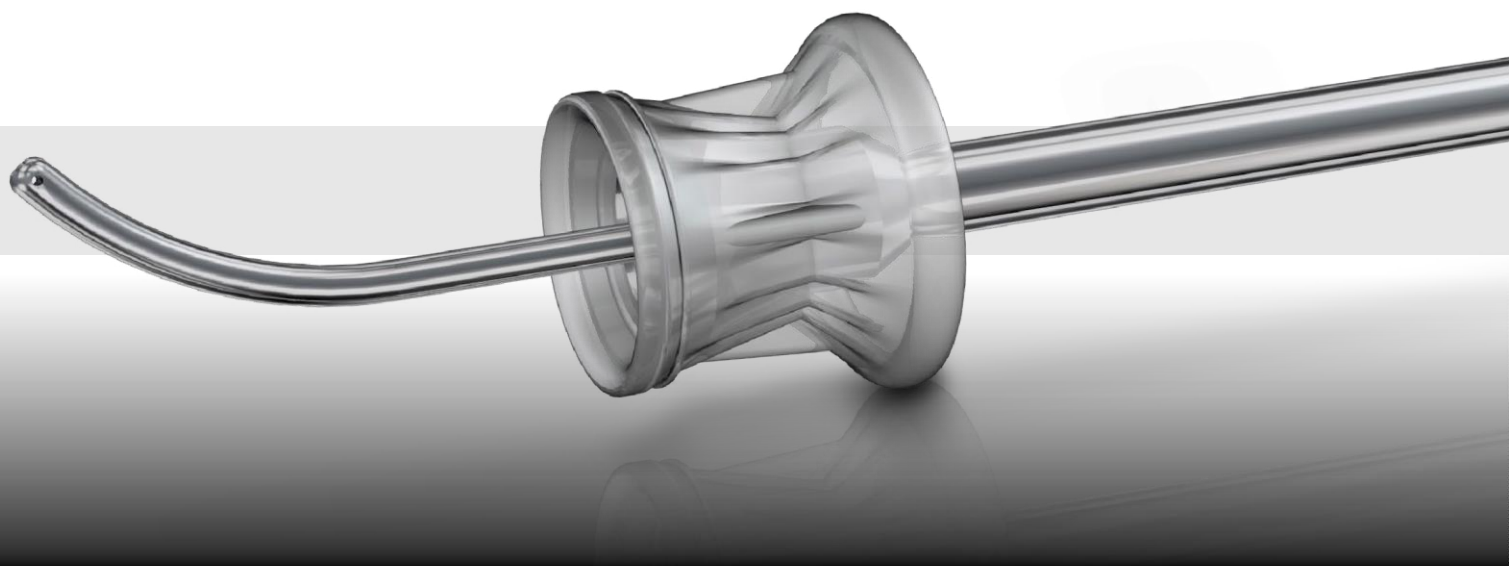

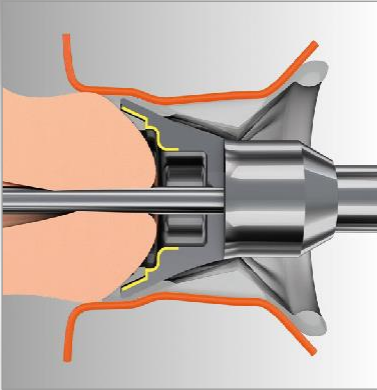

ONE SIZE
FITS ALL

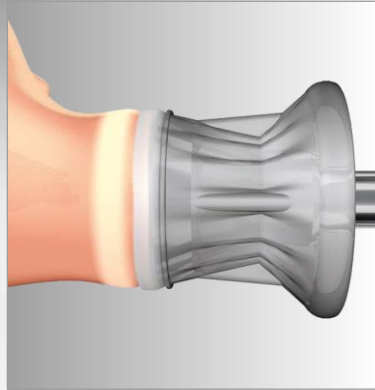

COLPO
TRANSILLUMINATOR



VACUUM
FIXATION


Коническая форма купола манипулятора и градации в самом колпаке означают, что можно разместить манипулятор на цервикальный канал любого размера. Эластичная вагинальная манжета гарантирует оптимальное уплотнение влагалища и, следовательно, стабильный пневмоперитонеум на всех этапах вмешательства.

Кольцевая подсветка обеспечивает оптимальную визуализацию режущей кромки и в то же время служит вспомогательным освещением, пока манипулятор находится во влагалище.

Аспирация в матке и шейке матки обеспечивает атравматичную и надежную фиксацию. Это позволяет избежать внутрибрюшинного смещения клеток.



Продольный масштаб зонда для матки означает, что зонд может быть адаптирован к различной длине шейки матки с минимальным расширением шейки матки.

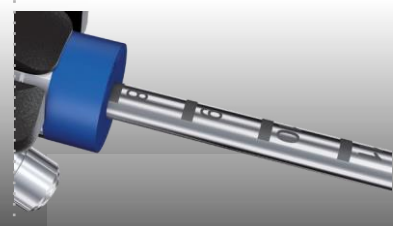

SecuFix Маточный манипулятор

Информация для заказа



SecuFix Маточный манипулятор, комплект

Состоит из: Маточный манипулятор SecuFix (8370701), Маточный зонд SecuFix с градуированной шкалой (8370702), SecuFix Кольпотрансиллюминатор, (набор из 10 шт., стерильно 41708370), чистящая щётка (6.05), чистящая щётка (6.09), уплотнительные колпачки (набор из 10 шт., 89.02)83707011



SecuFix Кольпотрансиллюминатор, стерильно

(набор из 10 шт. в индивидуальной упаковке, стерильно). В набор входит: Кольпотрансиллюминатор и вакуумная трубка (с обратным клапаном, аспирационным коннектором, Y-образным адаптером для использования со схожими инструментами, аспирационная скоба, одноразового применения.....41708370


Аксессуары




Маточный зонд8365.00



Световод
Диаметр Ø3.5 mm
(маркировка
оранжевая),
длина 2.3 m806635231

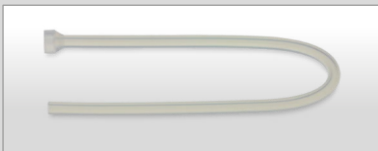

Соединительная трубка
для машинной чистки,
длина 600 mm163915

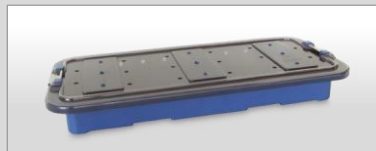

RIWO System Tray
Контейнер для обработки
внутренние параметры
500 x 200 x 60 mm,
стерилизация
паром.....38201.586